


TECNOMED:RAY

La serie di radiografici Tecnomed Italia, pensata per il tuo lavoro, è composta da macchine affidabili che ti consentono di operare in tutta tranquillità. Sono studiate per facilitare la procedura di radiografia alla poltrona, permettendo a te e al tuo team di focalizzarsi sul trattamento del paziente. Da sempre attenti alle esigenze dei nostri clienti, abbiamo ampliato la gamma che prevede, oltre all'ormai consolidato radiografico DC a corrente continua, il radiografico AC a corrente alternata, dimostratasi una valida alternativa ad un prezzo inferiore rispetto al modello DC. Leggeri e compatti, tutte le funzioni sono integrate nel monoblocco. L'avanzata concezione elettronica italiana e le rigorose procedure di collaudo permettono di garantire una macchia focale estremamente precisa e una costante affidabilità operativa.



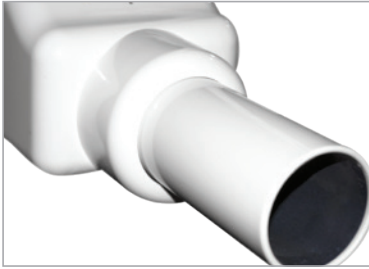

La superficie e gli angoli arrotondati della testata radiogena contribuiscono al facile allineamento durante la procedura di imaging. Sono dotati di un sistema a fusibile automatico, il termoswitch, che interviene in caso di pericolo. La macchia focale garantisce una perfetta risoluzione delle immagini.



Il pannello di controllo è posizionato sul monoblocco radiogeno garantendoti una massima operatività. Le funzioni, pre-programmate, possono essere modificate garantendo così una selezione pratica e veloce dei valori di esposizione per tutte le condizioni anatomiche e tipologiche dei tuoi pazienti.



Il telecomando a radiofrequenza ti permette di effettuare, in totale sicurezza, le radiografie dall'esterno della stanza radiografica. Il comando manuale pre-start, che abilita il funzionamento del telecomando, impedisce le emissioni di raggi X involontarie. Inoltre il telecomando è certificato IMQ; è dotato di un sistema di codice autogenerativo infinito in modo da impedire problemi di interferenza con qualsiasi altro comando a onde radio.



La testa è dotata di un goniometro consentendoti di avere una maggiore precisione durante il posizionamento.



Il doppio braccio pantografato, leggero e autobilanciato, risulta estremamente maneggevole. Gli snodi frizionati, inoltre, assicurano stabilità alla testa radiogena. Grazie alla possibilità di scegliere tra tre lunghezze del braccio, i nostri radiografici si integrano perfettamente con lo spazio di lavoro disponibile nel tuo studio.



Con i collimatori rettangolari intercambiabili (disponibili come optional), da 22x32mm e da 32x42 mm, si riduce la superficie corporea sottoposta ai raggi adattandola alla sola superficie utile del sensore.

Codice prodotto: DE71T.14

Scheda tecnica comparativa radiografici supporto muro



	Codice DE71RX	Codice DE71RX4	Codice DE71RX1	Codice DE72RX	Codice DE72RX4	Codice DE72RX1
Tipologia	DC-100Khz	DC-100Khz	DC-100Khz	AC	AC	AC
Installazione	Muro	Muro	Muro	Muro	Muro	Muro
Estensione	133+80 cm	133+40 cm	133+110 cm	133+80 cm	133+40 cm	133+110 cm
Braccio	80 cm	40 cm	110 cm	80 cm	40 cm	110 cm
Kv	60/70	60/70	60/70	70	70	70
Corrente anodica	4/7mA	4/7mA	4/7mA	8 mA	8 mA	8 mA
Macchia focale	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Filtrazione mm	2 AL	2 AL	2 AL	2 AL	2 AL	2 AL
Comando raggi	Wireless CE 0051	Wireless CE 0051	Wireless CE 0051	Wireless CE 0051	Wireless CE 0051	Wireless CE 0051
Tempo esposizione	0,020-1 sec	0,020-1 sec	0,020-1 sec	0,040-2sec	0,040-2sec	0,040-2sec
Distanza fuoco	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Diametro cono	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Alimentazione	190/240V-50Hz	190/240V-50Hz	190/240V-50Hz	230/240V-50HZ	230/240V-50HZ	230/240V-50HZ
Peso monoblocco	3,5 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg	6 Kg	6 Kg	6 Kg
Colore	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
Garanzia	24 Mesi	24 Mesi	24 Mesi	24 Mesi	24 Mesi	24 Mesi

Scheda tecnica radiografico su stativo



	Codice DE71RXP	Codice DE72RXP
Tipologia	DC-100Khz	AC
Installazione	Stativo	Stativo
Kv	60/70	70
Corrente anodica	4/7mA	8 mA
Macchia focale	0,7 mm	0,7 mm
Filtrazione mm	2 AL	2 AL
Comando raggi	Wireless CE 0051	Wireless CE 0051
Tempo esposizione	0,020-1 sec	0,040-2sec
Distanza fuoco	20 cm	20 cm
Diametro cono	6 cm	6 cm
Alimentazione	190/240V-50Hz	230/240V-50HZ
Peso monoblocco	3,5 Kg	6 Kg
Colore	RAL 9010	RAL 9010
Garanzia	24 Mesi	24 Mesi

Ingombri

