

PROPHY 500

FUNZIONALITÀ A PORTATA DI MANO
FUNCTIONALITY AT YOUR FINGERTIPS



Il carrello chirurgico Prophy 900 mette a disposizione tutti gli strumenti e le funzionalità necessarie per gli interventi chirurgici ed è progettato per garantire la massima efficienza operativa. La configurazione degli strumenti, e la relativa posizione, è personalizzabile, a seconda delle esigenze cliniche: Prophy 900 dispone infatti di faretra configurabile fino a cinque strumenti differenti.

La qualità dei materiali utilizzati assicura una robustezza e un design ai massimi livelli: la faretra in poliuretano spessa 2 cm è ricoperta da una vernice epossidica resistente ai disinfettanti. Al contrario dei materiali plastici, la copertura di Prophy 900, nel tempo, non ingiallisce e non crepa.

- **Massima efficienza:** garantisce processi di lavoro privi di intralci, mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- **Progettato per garantirvi alti livelli di performance operativa:** è dotato di tutte le funzionalità necessarie allo svolgimento degli interventi.
- Tutti i **parametri** sono **sotto controllo** grazie all'ampio pannello comandi LCD con tasti soft touch (optional) e pedaliera progressiva.
- **Indistruttibile:** faretra in poliuretano spessa 2 cm.
- **Spostamenti semplici** grazie alle comode ruote antistatiche e al ripiano portapedale.

Prophy 900 surgical cart has all the tools and features you need for surgery and is designed to ensure maximum operational efficiency. The setup of the available tools can be customized based on the specific clinical needs: Prophy 900 features a instrument table that can be set up for maximum five different instruments.

The quality of the materials used ensures utmost sturdiness and cutting-edge design: the 2cm thick polyurethane instrument table is covered with an epoxy paint resistant to disinfectants. Unlike plastics, the Prophy 900 coating does not turn yellow and does not crack.

- **Maximum efficiency:** it guarantees smooth work processes, providing all the necessary tools.
- **Designed to ensure operational efficiency:** it is equipped with all the functions necessary to carry out the interventions.
- All **parameters** can be perfectly kept **under control** thanks to the wide LCD control panel with optional soft touch keys and progressive control pedal.
- **Indestructible:** 2 cm thick polyurethane instrument table.
- **Easy movement** thanks to the comfortable anti-static casters and the pedal shelf.



L'alimentazione idrica separata garantisce totale autonomia operativa; è inoltre presente la regolazione spray indipendente per ogni strumento.

The separate water supply guarantees total operating autonomy; there is also an independent spray adjustment for each instrument.



Grazie ai 5 alloggiamenti di cui dispone la faretra, Prophy 900 può essere configurato con la strumentazione più adatta ad ogni esigenza.

Thanks to the 5 compartments of the instrument table, Prophy 900 can be set up with the most suitable equipment for every need.



Prophy 900 dispone di un ampio piano di appoggio sul quale vengono inseriti due tray portastrumenti, di dimensioni 175x280x15 mm, amovibili ed autoclavabili al fine di assicurare la massima igiene, necessaria soprattutto in ambito chirurgico.

Prophy 900 features a large table top on which are inserted two tool trays, 175x280x15 mm, removable and autoclavable in order to ensure maximum hygiene, which is absolutely necessary for surgery.



PANNELLO COMANDI LCD

Prophy 900 può essere dotato di un pannello comandi aggiuntivo con tasti soft touch: grazie allo schermo LCD tutti i parametri sono sotto controllo.

Il carrello è dotato di tecnologia in grado di riconoscere automaticamente lo strumento (micromotore, turbina o ablatore) selezionato e permette di impostarne parametri e modalità di utilizzo.

LCD CONTROL PANEL

Prophy 900 can be equipped with an additional control panel with soft touch keys: thanks to the LCD screen, you can control all parameters.

The cart features a technology that automatically recognizes the selected instrument (micromotor, high speed handpiece or scaler) and allows you to set parameters and the operating mode.

PEDALIERA PROGRESSIVA FEED FEK

La pedaliera progressiva Feed Fek attiva tutte le funzioni degli strumenti. L'azionamento degli spray può essere sempre attivo premendo il pulsante centrale e azionando la leva progressiva, oppure può essere attivato all'occorrenza premendo la sola leva inferiore. Inoltre dispone di un pulsante per l'inversione di marcia del micromotore. Il ripiano portapedale consente di appoggiare il pedale e muoversi con comodità.


FEED-FEK PROGRESSIVE PEDAL

The Feed Fek progressive control pedal activates all instrument functions. Spray actuation can always be on by pressing the central button and activating the progressive lever. It can also be activated, if necessary, by pressing the lower lever. It also features a button for reverse movement of the micromotor. The pedal shelf allows you to rest the pedal and move comfortably.



SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

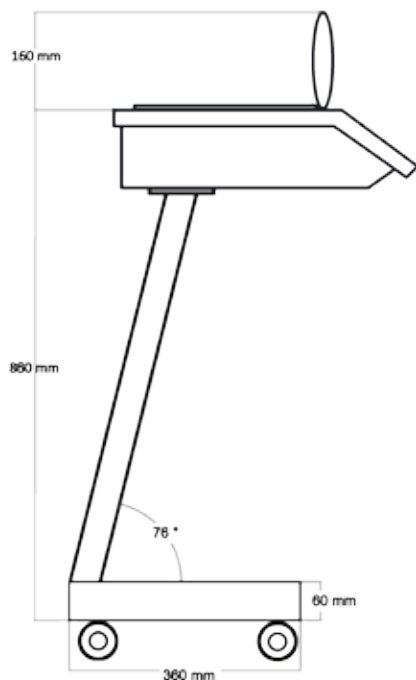

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 63 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pressione massima aria: 8 bar
Peso: 40 Kg
Protezione con fusibile da 6,3A

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 63 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum air pressure: 8 bar
Weight: 40 Kg
Protection with 6,3A



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Codice Code	Descrizione Articolo Item Description	Prophy 900 Cod. DE900E
	Siringa Luzzani acciaio Minimate <i>Luzzani Minimate steel syringe</i>	●
	Micromotore ad induzione led con cordone Safety Handpiece <i>Induction micromotor handpiece with safety cord and led light</i>	●
PM509F2MX	2° Micromotore ad induzione led con cordone Safety Handpiece <i>2° Induction micromotor handpiece with safety cord and led light</i>	Opt
	Cordone per turbina 4 vie, fibrato, Safety Handpiece <i>4-way turbine cord, fibre optic, Safety Handpiece</i>	●
DE1.43MX	2° Secondo cordone per turbina 4 vie, fibrato, Safety Handpiece <i>2° Second 4-way turbine cord, fibre optic, Safety Handpiece</i>	Opt
AG059FMX	Ablatore piezoelettrico compatibile EMS <i>EMS compatible piezoelectric scaler</i>	Opt
AG058FMX	Ablatore piezoelettrico compatibile Satelec <i>Satelec compatible piezoelectric scaler</i>	Opt
AG058FLMX	Ablatore piezoelettrico led compatibile EMS <i>EMS compatible piezoelectric scaler with LED</i>	Opt
PP782LXM	Lampada polimerizzatrice led 1800mw cm ² <i>Led curing light 1800mw cm²</i>	Opt
PP3500XM	Lampada polimerizzatrice led 3500mw cm ² <i>Led curing light 3500mw cm²</i>	Opt
DE1.032.1M	Pannello LCD <i>LCD Panel</i>	Opt
	Sicurezza <i>Safety</i>	●
	Bottiglia spray strumenti 1 litro <i>1 litre instrument spray bottle</i>	●
	Regolazione spray indipendente per ogni strumento <i>Individual spray adjustment for each instrument</i>	●
PC1866AM	Kit commutazione acqua rete/bottiglia <i>Running water/bottle switch kit</i>	Opt
	Pedale <i>Pedal</i>	●
	Due tray portastrumenti 175x280x15 mm <i>Two instrument holder trays 175x280x15 mm</i>	●
	Struttura <i>Structure</i>	●
	Maniglia destra di movimentazione <i>Right handle</i>	●
	Ripiano porta pedale <i>Pedal shelf</i>	●
	Alimentazione <i>Power supply</i>	●
	Centralina alimentazione 24/230 VAC <i>Power control unit 24/230 VAC</i>	●

Legenda: ● -> di serie // Opt -> optional

Legend: ● -> standard // Opt -> optional